



# ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

## BALANZA DIGITAL PERSONAL

Manual de Uso



Modelo:  
iB903B

Las imágenes son sólo indicativas. El producto puede variar sensiblemente en su estética sin previo aviso.

## ESTIMADO USUARIO

¡Gracias por elegir nuestra Balanza Inteligente! Para garantizar la precisión de los datos y una larga vida útil del producto, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarlo, y consérvelo para posteriores consultas.

## ACERCA DE LA BALANZA ASPEN

La BALANZA PERSONAL le permitirá almacenar y llevar un registro de su peso en un dispositivo inteligente (Smartphone o Tablet). Esta balanza puede transmitir los datos de peso a su dispositivo móvil mediante tecnología inalámbrica, como así también convertir esos resultados en un gráfico con el que podrá en cualquier momento hacer un seguimiento de su evolución. Descargue el software de la balanza ASPEN para utilizarlo con la balanza. Así, Podrá dar los primeros pasos en el control de su peso.

## FUNCIONES PRINCIPALES (de la aplicación)

- Control directo de la información de su peso mediante gráficos.
- Configuración de contraseña para proteger la información personal y almacenar datos de distintos usuarios.
- Grafica de modo simple y claro la tendencia del peso y del IMC (índice de masa corporal), lo que le permitirá hacer un seguimiento de los cambios.
- Tecnología inalámbrica.
- Conexión con diferentes dispositivos inteligentes.

## ❑ INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Pilas

Imagen Ilustrativa

Instalación


2 pilas AAA 1,5V



Instalación de pilas AAA.  
Instale las pilas de acuerdo a las indicaciones de polaridad en el compartimiento situado en la parte posterior de la balanza.

## ❑ MODO DE PESAJE NORMAL

Luego de instalar las pilas, coloque la balanza en un piso plano y rígido. Párese sobre la balanza y manténgase quieto durante el pesaje. Espere hasta que la pantalla de la balanza se estabilice y muestre el mismo peso durante unos segundos.

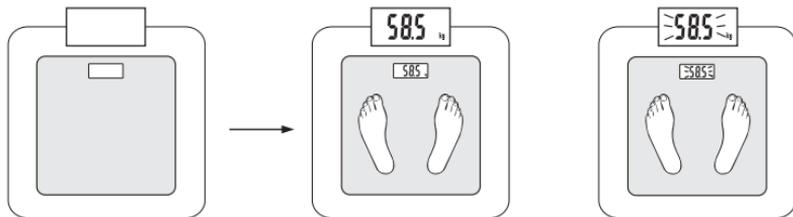

Instale las pilas y coloque la balanza en un piso plano. Para asegurar óptima precisión, ubique la balanza en piso plano y firme, evite alfombras y superficies blandas.

Párese con cuidado sobre la balanza (se enciende en forma automática), espere un momento hasta que aparezca el peso en la pantalla (como se ve en la imagen).

El resultado del pesaje destellará indicando que la medición se ha estabilizado.

Para que los datos del pesaje sean almacenados en su dispositivo móvil:

1º Instale la aplicación **BodyMonitor** en el dispositivo inteligente, desde Google Play Store o desde Apple App Store.

Código QR para descargar la aplicación en el dispositivo móvil:




2º Ingrese la información de usuario (nombre, edad, sexo, altura y peso, etc.), para configurar el usuario en la aplicación del dispositivo inteligente.

3º Encienda la balanza, verifique que la conexión Bluetooth esté activada en su dispositivo inteligente, y desde la aplicación en el dispositivo inteligente seleccione la balanza: vaya al menú principal de la aplicación y en "Mis Aparatos" seleccione la balanza.

4º Realice el pesaje de la forma indicada anteriormente. El valor medido será guardado en el usuario seleccionado.

## **APAGADO AUTOMÁTICO**

El dispositivo se apagará en forma automática luego de mostrar la misma lectura de peso durante unos segundos, si es que no está en uso.

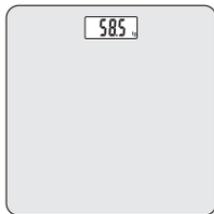

## ❑ SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

Símbolo	Descripción	Causa y solución
	Sobrecarga	Se sobrepasó la capacidad máxima de la balanza (el peso máximo está indicado en la balanza). Bájese de la balanza para evitar daños.
	Pila Baja	Las pilas tienen poca carga. Reemplace las pilas por unas nuevas.
	Volver a pesar	Error en la lectura del peso. Vuelva a pesarse.

## ❑ CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

1. NUNCA use la balanza en un ambiente demasiado húmedo, cálido o frío.  
(La temperatura debe estar entre 5°C y 35°C).
2. NUNCA use la balanza sobre alfombra, césped, pisos resbaladizos o irregulares.
3. NUNCA sacuda, golpee ni deje caer la balanza. Es un instrumento de precisión y debe manipularse con cuidado.
4. Conserve la balanza limpia. Para limpiar la balanza utilice un paño ligeramente humedecido. No sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores químicos o abrasivos. No utilice limpiadores ácidos.
5. NUNCA use la balanza en sitios con vibraciones intensas. Permanezca parado y estable sobre la balanza cuando la utilice.
6. Si la balanza no enciende, verifique si tiene pilas o si las pilas están agotadas.

## CONSULTAS FRECUENTES

### **El software no puede obtener los resultados del pesaje de la balanza**

- Verifique que la conexión Bluetooth esté activada en su dispositivo inteligente.
- Verifique que la balanza esté activada y esta esté dentro del área de cobertura de la señal.
- Verifique el estado de las pilas de la balanza, reemplácelas de ser necesario.
- Reinicie su dispositivo inteligente y vuelva a establecer la conexión Bluetooth.

### **Falla en la conexión con el dispositivo**

- Verifique que haya un solo dispositivo intentando establecer conexión con la balanza.
- Verifique que su dispositivo móvil tenga Bluetooth 4.0 o superior.

### **La pantalla LCD no responde**

- Verifique primero las pilas y reemplácelas por unas nuevas si fuera necesario.
- Cualquier reparación del dispositivo deberá ser realizada sólo por el servicio técnico o representantes autorizados.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ■ Alimentación: 2 pilas de 1,5V  AAA | ■ Tecnología inalámbrica       |
| ■ Peso máximo: Max. 180 kg  | ■ Indicador de sobrecarga      |
| ■ División mínima: d= 0,1 kg  | ■ Apagado automático           |
| ■ Indicador de pila baja  | ■ Pantalla electroluminiscente |

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para la reparación o adquisición de los accesorios y repuestos rogamos ponerse en contacto con alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.

Su balanza ASPEN tiene una garantía por defectos de fabricación.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del fabricante.

Consulte el listado adjunto para conocer detalles sobre los servicios técnicos autorizados.

Fecha de compra: .....

Comercio: .....

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

## IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse con fines comerciales ni médicos.

Importa, Distribuye y Garantiza:

**TENACTA S.A.**

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina

Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010

[www.aspensalud.com.ar](http://www.aspensalud.com.ar) / [info@tenacta.com.ar](mailto:info@tenacta.com.ar)

Hecho en China



CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

II0245-R00