



Salud en el hogar

By **EKS**

manual de uso

balanza digital de vidrio

Mod. 9522 WB




150 Kg.
Capacidad

100 g.
Graduación

38 mm
Amplio display
de LCD


Modelo extra
delgado

- ANTES DE EMPEZAR

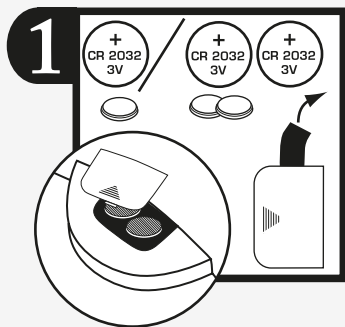


Retire la protección de las pilas
Funciona a pilas - 2 pilas de Litio CR 2032

1

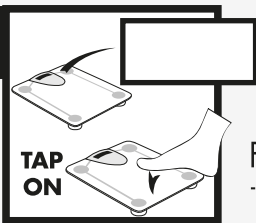


Para activar:
- De un golpecito con el pie sobre la balanza

2

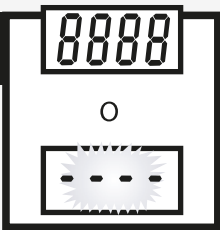


3

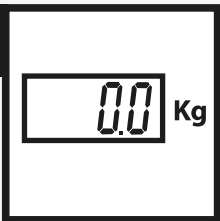


Espere hasta que aparezca 0.0

1

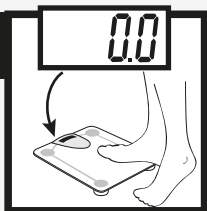


Para pesar

2

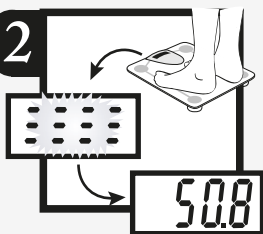





Peso

3

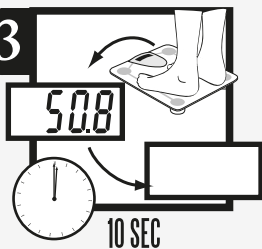

Apagado Automático

• USO Y MANTENIMIENTO

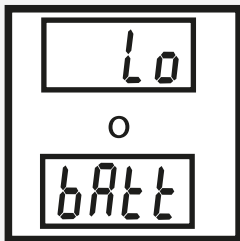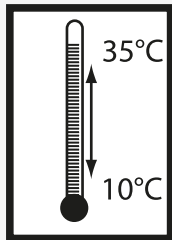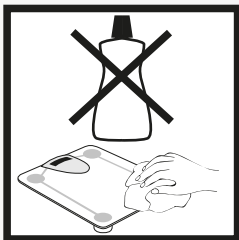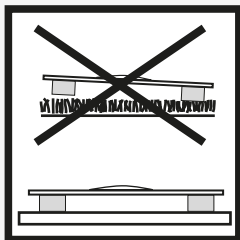

Problemas
Sustituir pilas

Balanza sobrecargada



Si la balanza no funciona correctamente, intente cortar el suministro eléctrico extrayendo las pilas, espere unos segundos y vuelva a colocar las pilas.

GARANTÍA

Antes de devolver la balanza, controle que ha seguido cuidadosamente las instrucciones precedentes. La garantía es de 1 año (a partir de la fecha de compra). La garantía incluye reparación gratis de cualquier fallo y el cambio de cualquier pieza que nosotros juzguemos sea defectuosa. La garantía no cubre daños causados por el uso incorrecto de la balanza. Para hacer uso de la garantía, lleve la balanza averiada al establecimiento a donde la compró junto con el certificado de garantía con el sello y firma del vendedor. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas.

 Peso máximo 150 Kg.

 Graduación 100 gr.

 4 Sensores.

 Modelo extra delgado.



2 pilas de Litio CR2032
(incluidas)

CERTIFICADO de CONFORMIDAD

Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espúreas e inmunidad a interferencias parásitas (de conformidad con la directiva EEC 89/336). Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la fuente emisora o apague el equipo que causa la interferencia y repita el pesaje.



Si hay algún error de medición z/o no responden los comandos para apagar el equipo, quedando éste encendido, desconecte las baterías durante 10 segundos y luego conéctelas nuevamente.

I M P O R T A N T E

Esta balanza es para uso exclusivamente familiar y no puede usarse con fines comerciales.

Fabricado en China por EKS International para Damedco SA

Importa, garantiza y distribuye Damedco SA, Girardot 1449 (C1427AKE) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
TE. (54 11) 45 54 74 44 - FAX (54 11) 51 95 00 10 - aspen@aspensalud.com.ar - www.aspensalud.com.ar

La fotos son ilustrativas, el producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso. *