




*Salud en el hogar*

By **EKS**


Modelo: 9565 LB

## Manual de instrucciones

Primero abra el compartimiento y retire la protección de la pila.

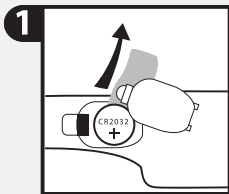

Una vez retirado la protección vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

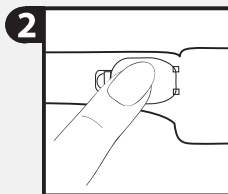


Descripción de la pila.  
(incluida)


1 x CR 2032  
Lithium




Para activar - súbase en la balanza

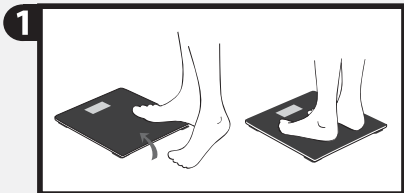

Aparecerá **0.0** en la pantalla y luego mostrará el peso

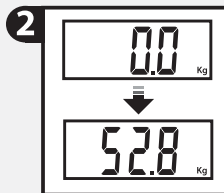

**OFF** - La balanza se apagará automáticamente

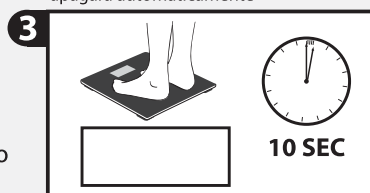


PESO


# Manual de instrucciones

## Uso y mantenimiento


No sumerja la balanza en agua

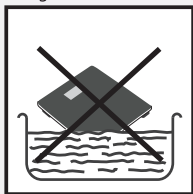

Utilice siempre la balanza sobre una superficie rígida. Nunca la coloque sobre alfombras.

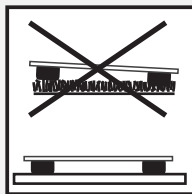

Para la limpieza utilice solamente un paño ligeramente húmedo. No utilice solventes ni sustancias abrasivas.

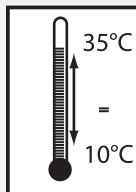

No guarde la balanza en lugares que pueden afectarla, por ejemplo lugares expuestos a humedad, alta temperatura y campos electromagnéticos.



Las balanzas con superficies de vidrio pueden ser resbaladizas cuando están mojadas. No se coloque sobre la balanza con los pies mojados.

## Problemas

**LO** – La pila tiene poca energía. Sustitúyala por otra nueva



**OL** – Balanza sobrecargada



**C** – Error



Si la balanza no funciona correctamente, retire las pilas. Luego vuelva a colocarlas y actívela de nuevo.

**IMPORTANTE**

Esta balanza es para uso exclusivamente familiar y no puede usarse con fines comerciales.



No la golpee, ni salte sobre ella. Evite impactos violentos o movimientos bruscos ya que se trata de un dispositivo de precisión. Tenga presente que el conjunto es sensible a impactos externos indeseados.

No inserte objetos extraños a través de las aberturas de la balanza.

No intente hacer ajustes o reparaciones abriendo al balanza, ya que invalidará la garantía de la misma.

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**

Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espúreas y resistencia a interferencias parásitas (de conformidad con la directiva EEC 89/336). Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la fuente emisora o apague el equipo que causa la interferencia y repita el pesaje.

**DEPOSICIÓN DE LAS PILAS / ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Regulación 2002/96/CE**

Este producto está incluido en la categoría de componentes eléctricos y electrónicos y los materiales con los que está compuesto pueden contener sustancias peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. El símbolo marcado con una cruz significa que este producto está sujeto a estrictas medidas de seguridad por la Legislación Europea (Directiva 2002/96/CE). El usuario debe deshacerse del producto devolviéndolo al establecimiento donde lo adquirió ("Obligación de devolución") o bien depositarlo en un container específico de reciclaje. Todo producto que se deposite en el container de reciclaje será desmontado, limpiado y deshecho de manera ecológica y segura para el medio ambiente.

El reciclaje selectivo ayuda a reducir la cantidad de desechos y manejarlos libres de sustancias tóxicas. Esto disminuye los efectos nocivos en el medio ambiente conforme con la Directiva de Materiales Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

Para obtener más información sobre los procedimientos a seguir, póngase en contacto con el departamento de reciclaje de su ciudad.





Tenacta S.A. Garantiza por el término de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto de la balanza ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez debe presentar este manual con el número de serie o lote, fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y la respectiva factura de compra.

### **GARANTÍA**

Lote / Serie Nº: .....

Fecha de compra: .....

Comercio: .....

Fabricado en R.P. China por EKS International para Tenacta S.A.  
Importa, garantiza y distribuye Tenacta S.A.  
Girardot 1449 (C1427 AKE) - C.A.B.A. - Argentina  
Tel. (54 11) 45 54 74 44 - Fax. (54 11) 51 95 00 01  
aspensalud.com.ar / www.aspen-salud.com.ar