



Salud en el hogar

manual de uso

balanza de baño

BR 9706



BR 9706 73

BR 9706 75

BR 9706 71

Felicitaciones, Ud ha adquirido una de las balanzas de baño de mayor calidad. Por favor lea las instrucciones antes de comenzar a usarla.

VENTAJAS DE SU BALANZA

Esta balanza tiene el método más sencillo para el control de su peso.

- Lectura fácil.
- Diseño moderno.
- Capacidad: 120 kg

Nota: Este modelo de balanza se provee en varios colores.

INSTRUCCIONES DE USO

Ajuste de cero: Presione la plataforma algunas veces con la mano y suelte luego, para realizar el ajuste del cero con la pequeña ruedita ubicada en la parte inferior delantera de la balanza. Coloque el equipo sobre una superficie horizontal plana y rígida. Si coloca su balanza sobre una alfombra, esto puede dar error de lectura.

Párese suavemente y manténgase sin moverse para evitar variaciones en la indicación.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO





No sobrecargue la balanza respetando el peso máximo admisible.

Evite golpes con cargas súbitas.

Mantenga la balanza en un lugar seco.

Límpuela con detergente y no utilice thinner o solventes evitando la entrada de líquidos en el interior del sistema.

No lubrique la balanza.

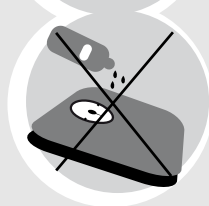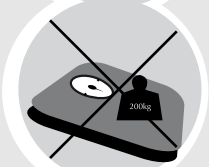

El fabricante garantiza una precisión según el siguiente esquema:

Para pesadas entre **0 y 60 kg** el error es **$\pm 1,2$ divisiones**

Para pesadas entre **60 y 120 kg** el error es **$\pm 2,0$ divisiones**

IMPORTANTE

Esta balanza es para uso exclusivamente familiar y no puede usarse con fines comerciales.

Importa y garantiza TENACTA S.A.

Girardot 1449, C1427AKE

Tel. (54-11) 4554-7444 Fax: (54-11) 5195-0010

C.A.B.A. - Argentina

www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar