



ASPEN

Salud en el hogar

By **EKS**

manual de uso

balanza digital de baño

con analizador corporal

Mod. 9877 SV



Grasa
corporal %

Hidratación
corporal %

Masa
muscular %

Modo atleta


Registro de
12 usuarios




Precauciones

Las embarazadas **NO** deben utilizar el analizador de grasa corporal. Las personas con marcapasos u otros dispositivos médicos operados por pilas **NO** deben utilizar el analizador de grasa corporal.

• ANTES DE EMPEZAR

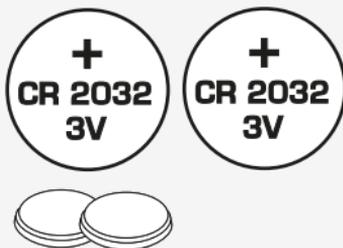


Retire la protección de las pilas
Funciona a pilas - 2 pilas de Litio CR 2032

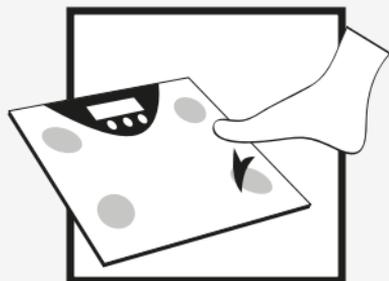


- 1** Para activar:
- De un golpecito con el pie sobre la balanza



- 2** Espere a que aparezca **0.0 KG** en la pantalla antes de colocarse sobre la balanza

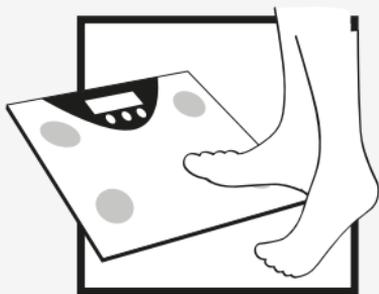

3 Para pesar


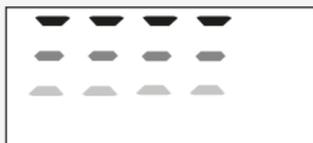


Peso

PROGRAMACIÓN DE DATOS PARA CADA USUARIO



- 1** Pulse **SET**. Seleccione el número de usuario que desee programar o cambiar

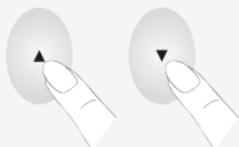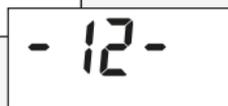


- 2** Número de usuario
Pulse la tecla ▲ (arriba) o ▼ (abajo)
hasta visualizar el número de usuario elegido



- 3** Pulse **SET** para confirmar



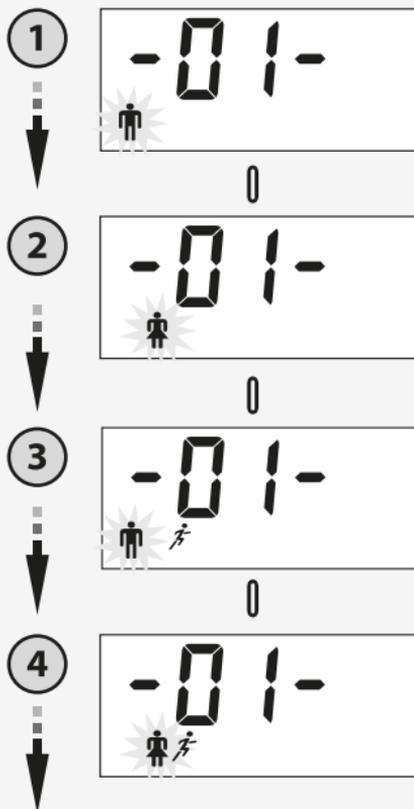


4 Símbolo de

1. HOMBRE
2. MUJER
3. ATLETA MASCULINO
4. ATLETA FEMENINA


El modo de atleta

se refiere a una persona que hace regularmente ejercicio 10 horas a la semana.


5 Presione el botón ▲ (arriba) o ▼ (abajo) para seleccionar el género y el modo correctos.

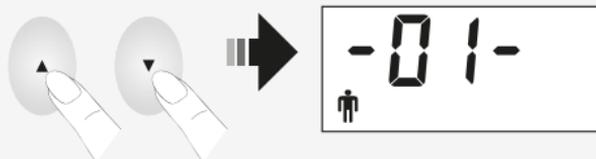

6 Pulse **SET** para confirmar

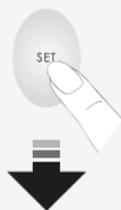

7 AGE - edad - edad por defecto = 30

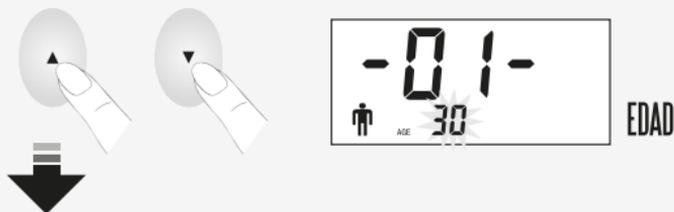

- 8** Pulse la tecla ▲ (arriba) o ▼ (abajo)



- 9** Pulse SET para confirmar




- 10** HIGH - altura - Estatura por defecto = 175 cm



ALTURA

11 Pulse la tecla ▲ (arriba) o ▼ (abajo)

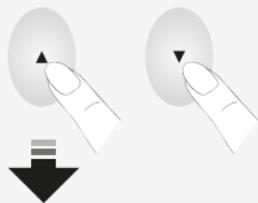

12 Pulse SET para confirmar



13 La pantalla muestra los datos uno a uno, y después pasa al modo de pesar.




- 14 OFF** La balanza se apagará automáticamente una vez transcurridos 16 segundos




Si se cancela la programación, la pantalla parpadeará durante 10 segundos y entonces pasará al modo de pesar.

• MEDICIÓN DE GRASA, NIVEL DE HIDRATACIÓN CORPORAL Y MASA MUSCULAR

- 1** Seleccione el número de usuario correspondiente con las teclas ▲ / ▼

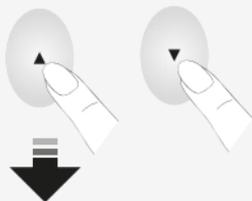

- 2** Tras la selección, aparecerán **0.0** Kg y todos los datos personales del usuario elegido.

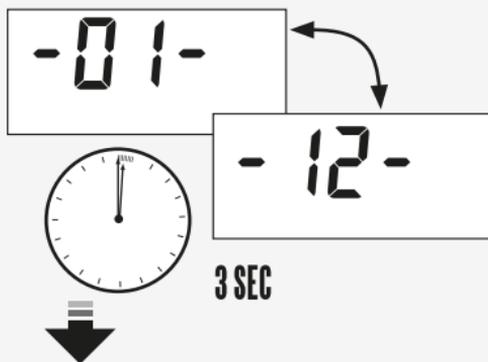


Si los datos no son correctos, pulse **SET** para introducirlos de nuevo.

- 3** Suba a la balanza con los pies descalzos



- 4** Se verá una línea de puntos parpadeantes.

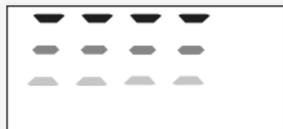

- 5** Peso + datos personales




- 6** Se muestra "0000", y desaparece.



7 Peso + datos personales

3X

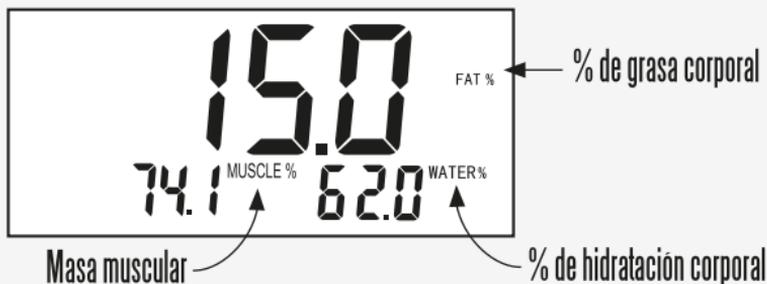8 % de grasa corporal + % de hidratación corporal + masa muscular

- 9 OFF** La balanza se apagará automáticamente una vez transcurridos 16 segundos




• PROBLEMAS



Lo
La pila tiene poca energía.
Sustitúyala por otra nueva



Err
Balanza sobrecargada O
error durante la medición de grasa corporal.

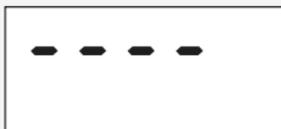

Falta de contacto con los sensores.
Los pies deben estar descalzos.



! Si la balanza no funciona correctamente, intente cortar el suministro eléctrico extrayendo las pilas. Entonces, sustituya las pilas y vuelva a comenzar

HOMBRE	EDAD	% DE GRASA CORPORAL			
		Bajo	Medio	Alto	
	20-39	5.0-7.9	8.0-19.0	19.1-45.0	3
	40-59	5.0-10.9	11.0-22.0	22.1-45.0	3
	60-79	5.0-12.9	13.0-25.0	25.1-45.0	3
MUJER		% DE GRASA CORPORAL			
	20-39	5.0-20.9	21.0-33.0	33.1-45.0	3
	40-59	5.0-22.9	23.0-35.0	35.1-45.0	3
	60-79	5.0-23.9	24.0-36.0	36.1-45.0	3
ATELTA MASCULINO		% DE GRASA CORPORAL			
	20-39	5.0-5.9	6.0-12.0	12.1-45.0	3
	40-59	5.0-5.9	6.0-13.0	13.1-45.0	3
	60-79	5.0-7.9	8.0-13.0	13.1-45.0	3
ATELTA FEMENINO		% DE GRASA CORPORAL			
	20-39	5.0-13.9	14.0-18.0	18.1-45.0	3
	40-59	5.0-15.9	16.0-20.0	20.1-45.0	3
	60-79	5.0-16.9	17.0-20.0	20.1-45.0	3

% DE HIDRATACIÓN CORPORAL			% DE MASA MUSCULAR		
Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
.0-54.9	55.0-70.0	70.1-85.0	45.0-72.9	73.0-82.0	82.1-95.0
.0-49.9	50.0-68.0	68.1-85.0	45.0-69.9	70.0-79.0	79.1-95.0
.0-49.9	50.0-65.0	65.1-85.0	45.0-66.9	67.0-77.0	77.1-95.0
% DE HIDRATACIÓN CORPORAL			% DE MASA MUSCULAR		
.0-47.9	48.0-65.0	65.1-85.0	45.0-67.9	68.0-77.0	77.1-95.0
.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0	45.0-64.9	65.0-75.0	75.1-95.0
.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0	45.0-61.9	62.0-72.0	72.1-95.0
% DE HIDRATACIÓN CORPORAL			% DE MASA MUSCULAR		
.0-54.9	55.0-71.0	71.1-85.0	45.0-74.9	75.0-85.0	85.1-95.0
.0-49.9	50.0-69.0	69.1-85.0	45.0-72.9	73.0-83.0	83.1-95.0
.0-49.9	50.0-67.0	67.1-85.0	45.0-69.9	70.0-80.0	80.1-95.0
% DE HIDRATACIÓN CORPORAL			% DE MASA MUSCULAR		
.0-47.9	48.0-66.0	66.1-85.0	45.0-67.9	68.0-80.0	80.1-95.0
.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0	45.0-65.9	66.0-78.0	78.1-95.0
.0-44.9	45.0-65.0	65.1-85.0	45.0-64.9	65.0-76.0	76.1-95.0

GARANTÍA

Antes de devolver la balanza, controle que ha seguido cuidadosamente las instrucciones precedentes. La garantía es de 1 año (a partir de la fecha de compra). La garantía incluye reparación gratis de cualquier fallo y el cambio de cualquier pieza que nosotros juzguemos sea defectuosa. La garantía no cubre daños causados por el uso incorrecto de la balanza. Para hacer uso de la garantía, lleve la balanza averiada al establecimiento a donde la compró junto con el certificado de garantía con el sello y firma del vendedor. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas.

 Peso máximo 180 Kg.

 Graduación 100 gr.

 4 Sensores.

 Modelo extra delgado.



CE



2 baterías de Litio CR2032
(incluidas)

CERTIFICADO de CONFORMIDAD

Esta balanza cumple con todos los requisitos europeos de radiaciones espúreas e inmunidad a interferencias parásitas (de conformidad con la directiva EEC 89/336). Si las interferencias tienen lugar durante el pesaje, debido a una fuente potente de radiación electromagnética (teléfono inalámbrico, unidades de transmisión, etc.) retire la balanza de la fuente emisora o apague el equipo que causa la interferencia y repita el pesaje.



Si hay algún error de medición z/o no responden los comandos para apagar el equipo, quedando éste encendido, desconecte las baterías durante 10 segundos y luego conéctelas nuevamente.

I M P O R T A N T E

Esta balanza es para uso exclusivamente familiar y no puede usarse con fines comerciales.

Fabricado en China por EKS International para Damedco SA

Importa, garantiza y distribuye Damedco SA, Girardot 1449 (C1427AKE) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
TE. (54 11) 45 54 74 44 - FAX (54 11) 51 95 00 10 - aspen@aspensalud.com.ar - www.aspensalud.com.ar

La fotos son ilustrativas, el producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso.´